



Agitateur oscillant "Vibromatic"

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DIGITALE DE LA VITESSE ET DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT.



Fréquence optimale d'agitation: 950 oscillations par minute

APPLICATIONS

Dissoudre, extraire, homogénéiser.

CARACTÉRISTIQUES

Régulation électronique digitale de la vitesse de 100 à 950 oscillations par minute (1900 vibrations) et du temps de fonctionnement de 1 à 999 minutes, ou en continu.

Amplitude de l'oscillation: 8 mm.

Bras facilement démontables, pourvus de 8 pinces permettant d'adapter tout type de tubes ou flacons, de diamètres compris entre 5 et 50 mm.

Charge maximale supportable: 4 kg.

PANNEAU DE COMMANDES

1. Ecran digital d'indication des osc./min. et du temps.
2. Indicateur du paramètre sélectionné.
3. Sélecteur des paramètres vitesse ou temps.
4. Bouton d'augmentation de la valeur du paramètre.
5. Bouton de diminution de la valeur du paramètre.
6. Bouton marche/arrêt.

MODÈLE

Code	Oscillations p.m.	Capacité (maxi.) Kg	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
7000384	100 - 950	4	23 77 27	34	11



ACCESSOIRES

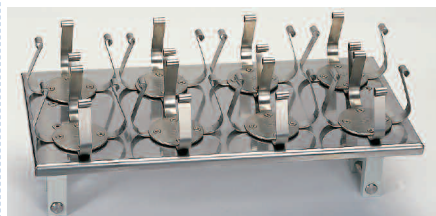


Plate-forme adaptable pour fioles Erlenmeyer, construite en acier inox. AISI 304, avec orifices multi-adaptateurs pour des capacités de 50 à 1000 ml.

Dimensions de la plate-forme: 38 cm longueur x 19 cm profondeur.

Poids: 2 Kg.

Capacité de la plate-forme:

- 18 Erlenmeyer de 50 ml.
- 12 Erlenmeyer de 100 ml.
- 6 Erlenmeyer de 250 ml.
- 6 Erlenmeyer de 500 ml.
- 3 Erlenmeyer de 1000 ml.

Code **3001221**



Adaptateurs pour fioles Erlenmeyer.

Construits en acier inoxydable trempé.

Code

1001003	Adaptateur pour	50 ml.
1000978	Adaptateur pour	100 ml.
1000979	Adaptateur pour	250 ml.
1000980	Adaptateur pour	500 ml.
1000981	Adaptateur pour	1000 ml.



*Modèle Vibromatic
avec plate-forme adaptée.*