



Autoclaves pour stérilisation "Presoclave II" 30, 50 y 75

AVEC CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE, CYCLE PAR MICROPROCESSEUR ET PURGE ATMOSPHÉRIQUE.
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE ET DU TEMPS AVEC LECTURE DIGITALE.
POUR TEMPÉRATURES DE 115 °C JUSQU'À 134 °C (0,62 A 2 BAR).
CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR DES APPAREILS A PRESSION.
MODELE VERTICAL. CAPACITÉS: 30, 50 ET 75 LITRES.



SÉCURITÉ:

SOUPE DE SÉCURITÉ: PREVIENT QUAND LA PRESSION DEPASSE LA LIMITE MAXIMALE.
PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ: DECONNECTE LES ELEMENTS CHAUFFANTS EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE PRESSION.
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ: CAS D'EXCES DE TEMPÉRATURE OU MANQUE D'EAU DANS LE RESERVOIR DE L'AUTOCLAVE.
DISPOSITIFS DE SECURITE DU COUVERCLE: LE COUVERCLE NE PEUT ETRE OUVERT SI LA CHAMBRE EST SOUS PRESSION.
ENVELOPPE DE PROTECTION THERMIQUE DU COUVERCLE.

Une alternative économique. Semi-automatique.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur et partie supérieure en acier inox. AISI 304.
Élément chauffant en acier inox. spécial INCOLOY de grande durée, résistant à la corrosion et à la haute température.
Réservoir, couvercle et fermeture en acier inox AISI 316.
Purge atmosphérique automatique.
Système de fermeture en 6 points.

PANNEAU DE COMMANDES



1. Manomètre.
2. Indicateur lumineux d'alarme.
3. Indicateur lumineux de fin de cycle.
4. Indicateur lumineux de porte ouverte.
5. Ecran d'indication de la température.
6. Ecran d'indication de la température.
7. Bouton de température (de 115 °C à 134 °C).
8. Bouton d'augmentation de la valeur.
9. Bouton marche
10. Bouton d'arrêt.
11. Bouton de diminution de la valeur.
12. Bouton de temps (de 3' à 59').
13. Ouverture du couvercle.


MODÈLES	Code	Capacité litres	Ø	Haut. (utiles cm)	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur cm)	Consom. W	Poids Kg
PRESOCLAVE II 30	4002135	30	30	40	97 48 62	2800	62
PRESOCLAVE II 50	4001725	50	30	70	117 48 62	3000	75
PRESOCLAVE II 75	4002136	75	40	60	107 58 72	3600	100

Livré sans paniers.

ACCESSOIRES: Paniers en acier inox. AISI 304. Tambours de stérilisation en acier inox. AISI 304. Détergent Bio-Sel. Distillateur d'eau spécial pour autoclaves. (Voir page 53).



NOUVEAU

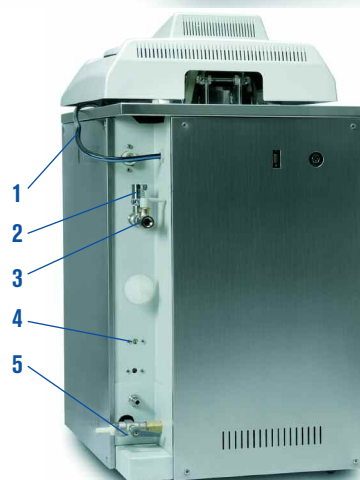

PARTIE ARRIÈRE

1. Cable d'alimentation électrique.
2. Soupape de sécurité.
3. Soupape de vide de la vapeur.
4. Thermostat de sécurité.
5. Soupape de sélection du drainage.

COMPLEMENT qui doit être installer à l'usine. Sonde Pt100 (voir page 53).