



Pompe péristaltique "Percom N-M"

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE VITESSE ET LECTURE DIGITALE.
AVEC TÊTE MULTIADAPTATEUR POUR TUBES DE 4 A 12 mm Ø (EXT.).
DÉBIT RÉGLABLE DEPUIS 1080 JUSQU'À 73800 ml/h.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle de table de dimensions réduites.
Silencieuse et exempte de vibrations.
Vitesse sélectionnable de 20 et 200 r.p.m.

PANNEAU DE COMMANDES

Touche marche/arrêt.
Ecran indicateur de la vitesse.
Touche augmentation de la vitesse.
Touche diminution de la vitesse.


PARTIE ARRIÈRE

Connexion pour commande à distance par pédale marche/arrêt fournie comme accessoire.

MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Débit en H ₂ O ml/heure	Consom. W	Poids Kg
3001300	16 12 18	1080 jusqu'à 73800	12	2,6

Graphique débit /r.p.m. en fonction du Ø intérieur du tube.

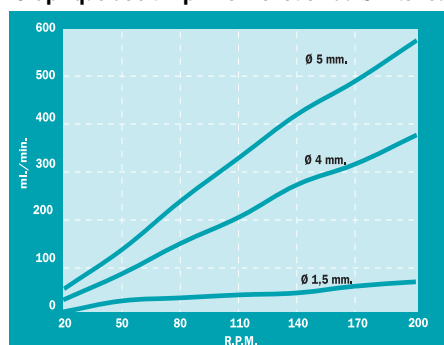

Graphique établi avec le fluide: eau distillée. Ces caractéristiques varient selon la densité du liquide.



Pompe péristaltique doseuse "Peristaltic PR-2003"

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE VITESSE ET LECTURE DIGITALE.
AVEC TÊTE MULTIADAPTATEUR POUR TUBES DE 4 A 12 mm Ø (EXT.).
DOSAGE PROGRAMMABLE DEPUIS 10 ML JUSQU'À 10 LITRES.
DÉBIT MAXIMAL 1500 ml/min.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle de table de dimensions réduites.
Silencieuse et exempte de vibrations.
Pince d'attache du tube de pompage.
Verre doseur "Pecipump" pour un dosage plus précis.
Dose: la pompe dose un volume plusieurs fois pour une période de temps.
Flux: la pompe dose un débit pour un temps déterminé ou continuellement.

Epaisseur de tube maximum recommandé (mm): .2
Diamètre extérieur maximum du tube (mm): ...12
Note: La précision dépend du Ø du tube et de la vitesse.

PARTIE ARRIÈRE

Interrupteur de mise en marche.
Connexion pour commande à distance par pédale marche-arrêt fournie comme accessoire.

MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Débit en H ₂ O ml/heure	Consom. W	Poids Kg
4129050	25 19 23	90.000	65	4

Ø tube (mm)	Dosage (ml/minute)	
	60 r.p.m.	400 r.p.m.
	4x8 80	500
	6x9 140	1200
8x12	180	1500

PANNEAU DE COMMANDES

Clavier numérique pour faciliter l'entrée des données.
Ecran LCD de 16x2 caractères.
Mémoire de calibration.
Changement de sens de pompage depuis le panneau de commandes.
Indication du sens de rotation.
Connexion pour une pédale marche/arrêt.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse (r.p.m.):60 - 400
Précision (ml):1 à 0,1
Gamme de dosage (ml):10 - 9999
Gamme de débit Voir tableau
N° de programmes:99
N° de doses répétées:9999
Interval de répétition:1 - 9



NOUVEAU
DESIGN

ACCESSOIRES POUR POMPES PÉRISTALTIQUES "PERCOM N-M" ET "PR-2003"

Tubes de silicone standard.

Les codes correspondent à 1 mètre de tube.

Code **8991204** 4x 8 mm (Ø tube)
Code **8991205** 6x 9 mm (Ø tube)
Code **8991206** 8x12 mm (Ø tube)

Pédale de contrôle à distance Marche/Arrêt.
Code **1001044**