

Sistema compacto de digestión "MBC"



MBC-6 N



Panel de control

Ventajas

Puesta en marcha programable

Regulador de temperatura incorporado en el mueble el cual dispone de 9 programas con 18 segmentos por programa de temperatura y tiempo cada uno.

Panel de control digital integrado en el equipo.

Características generales:

Manipulación rápida y segura de las muestras

Soporte integrado para tubos que facilita el enfriamiento y ahorra espacio.



1) Digestión 2) Enfriamiento 3) Colector de humos retirado

Sistema compacto de digestión "MBC"

Ejemplo gráfica

Características:

- Utilizado conjuntamente con "SCRUBBER", no necesita vitrina extractora
- Carcasa bloque superior realizada en acero inoxidable con recubrimiento de Halar
- Carcasa inferior pintada con resina Epoxi
- Termostato de seguridad por sobre temperatura.
- Bloque metálico realizado en aleación de aluminio.
- Aislante térmico: Lana de roca y fibra cerámica.
- Resolución: 1°C
- Estabilidad: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ a 50°C y $\pm 1^{\circ}\text{C}$ a 400°C
- Homogeneidad: inferior al 1%
- EMP: inferior a 2°C
- Tamaño muestra:



Sólidos: 5 gr. (macro), 1 gr. (micro)
Líquidos: 15 mL. (macro), 3 mL. (micro)

Aplicaciones:

Indicados para la determinación del Nitrógeno/proteína tales como:
Productos alimenticios, piensos, fertilizantes, granos, vegetales, cervezas, carnes, aguas, petróleo, etc.

Se suministran completos con los accesorios:


Un soporte de tubos de digestión (incluye los tubos)
Soportes y gradillas realizados en acero inoxidable AISI 304
Un colector de humos



GP-12/N



EG-12/N

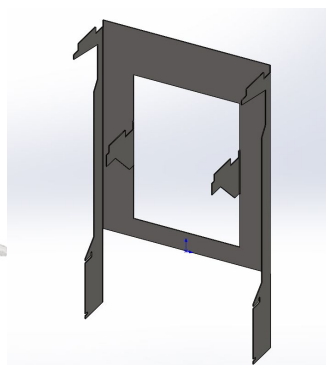

SPD-12/N

Referencia	Plazas	Ø tubo mm.	H x A x F en mm	Temp. °C	Potencia W	Peso kg.
MBC-6/N	6	42	740 x 355 x 400	450	1500	16
MBC-12/N	12	42	740 x 355 x 565	450	2000	21
MBC-20/N	20	42	740 x 355 x 565	450	2500	27
MBCM-12	12	26	740 x 355 x 400	450	1500	15
MBCM-24	24	26	740 x 355 x 565	450	2000	20
MBCM-40	40	26	740 x 355 x 565	450	2500	25

Sistema compacto de digestión "MBC"

Bloque metálico calefactor

Referencia	Dimensiones	Plazas	Ø tubo	Potencia W	Peso kg.
MB-6/N	185 x 355 x 360 mm	6	42	1500	13,5
MB-12/N	185 x 355 x 475 mm	12	42	2000	18,5
MB-20/N	185 x 465 x 475 mm	20	42	2500	23,5
MMB-12	185 x 355 x 360 mm	12	26	1500	12,5
MMB-24	185 x 355 x 475 mm	24	26	2000	17,5
MMB-40	185 x 465 x 475 mm	40	26	2500	22,5



Accesorios

Gradilla de tubos con soporte			Colector de humos con soporte	Soporte
Referencia	Plazas	Ø tubo	Referencia	Referencia
GP-6/N	6	42	EG-6/N	SPD-6/N
GP-12/N	12	42	EG-12/N	SPD-12/N
GP-20/N	20	42	EG-20/N	SPD-20/N
GPM-12	12	26	EGM-12	SPD-6/N
GPM-24	24	26	EGM-24	SPD-12/N
GPM-40	40	26	EGM-40	SPD-20/N



TB-42300



TB-26300

Referencia	Descripción	Volumen	Dimensiones
TB-42300	Tubo de digestión	250 ml	42 (Ø) x 300 mm
TB-42300E	Tubo de digestión reforzado	250ml	42 (Ø) x 300 mm
TB-26300	Tubo de digestión	100 ml	26 (Ø) x 300 mm



TB-42300E